

CS **Occusept:**

Před použitím si pozorně prostudujte návod k použití. Ušchovajte si návod k použití pro případ dalšího použití.

Určený účel: Occusept je zdravotnický prostředek pro podpůrnou léčbu humánních onemocnění očí. Zlepšuje zvlhčování oka při syndromu suchého oka různé etiologie, vlivem užívání některých léků nebo vnějších podmínek (vysoká teplota, vítr apod.). Aplikace viskoelastického roztoku zajišťuje zvlhčování oka, vede k odstranění cizorodých látek a zklidňuje oči při akutním nebo chronickém zánětu spojivek (conjunctivitis) neinfekčního původu, při podráždění očí vlivem vnějších podmínek (slunce, prach, kouř apod.) nebo vlivem nošení kontaktních čoček a při dlouhodobém zrakovém vypětí. Roztok lze použít pro výplachy očí při jejich zasažení dráždivými látkami a pro odstranění cizích těles.

Složení: Hypromellosem 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras decahydricus 2 mg v 1 ml. Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetat, caprylic/capric triglyceride, polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.

Charakteristika: Occusept je oftalmologikum, oční kapky. Je to nízkoviskózní izotonický roztok, s nedráždivými konzervanty kyselinou boritou, tetraboritanem sodným a síranem zinečnatým, lipidickými složkami phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine a extraktem Euphrasia officinalis. Lipidické složky, frakce čistěného sojového lecitinu phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine se přirozeně vyskytují v slzách a zlepšují krytí oka ochranným filmem (prodlužují dobu, po kterou je film nepřerušeny, neboť vytváří lipidickou vrstvu, která brání odpařování a narušování souvislé vrstvy slzného filmu), což významně zlepšuje komfort pacienta při poruchách funkce tvorby slz. Euphrasia officinalis (světlík lékařský) se tradičně používá při zánětlivých onemocněních spojivek provázených zčervenáním a pálením očí, při zvýšeném slzení, otocích, zčervenání očních víček nebo okrajů víček.

Indikace: Přípravek se používá pro zvlhčování oka při syndromu suchého oka, pro vytvoření ochranného filmu při působení nepříznivých vnějších podmínek, při akutním nebo chronickém zánětu spojivek, při podráždění očí, při únávě po dlouhodobém zrakovém vypětí a pro výplach očí.

Kontraindikace: Hypersenzitivita na kteroukoliv látku uvedenou ve složení přípravku.

Interakce: Přípravek se nesmí používat současně s očními kapkami, které obsahují soli kovů.

Nežádoucí účinky: Nejsou známy. Při výskytu neobvyklých reakcí se poraďte s očním lékařem.

Dávkování a způsob aplikace: Přípravek se dává individuálně, obvyklá dávka je 2 až 3 krát denně 1 až 2 kapky do spojivkového vaku. Přípravek lze podle potřeby užívat i dlouhodobě.

NÁVOD K POUŽITÍ KAPACÍHO UZÁVĚRU:

- Otočením uzávěru proti směru hodinových ručiček odtrhněte zajišťovací proužek.
- Sejměte uzávěr a otočte lahvičku dnem vzhůru.
- Konečky prstů jedné ruky stáhněte dolní víčko a lehkým stiskem druhé ruky na lahvičku dávku předepsaný počet kapek do oka nebo spojivkového vaku odhaleného stáhnutím dolního víčka.
- Při kapání do oka zabraňte kontaktu kapátka s okem nebo pokožkou a nedotýkejte se špičky kapátka, aby nedošlo ke kontaminaci roztoku.
- Po použití nasadte uzávěr vždy zpět a dobře uzavřete.
- Výplach oka proveďte přímým proudem roztoku z lahvičky do oka, nebo pomocí přiložené oční vaničky. Vaničku naplňte po rysku několikerým

stlačením lahvičky. Vaničku přiložte na postižené oko, zakloňte hlavu tak, aby oko bylo ponořené v kapalině. Pohybuje okem, aby se smáčel celý povrch očního bulbu. Doporučená doba výplachu je 2-5 minut.

- Pokud používáte kontaktní čočky, přípravek Occusept aplikujte v případě zánětů a podráždění očí a při výplachu očí, jen pokud jsou kontaktní čočky vyjmuté. Kontaktní čočky je možno nasadit až 30 minut po použití přípravku.
- Při nasazených kontaktních čočkách se přípravek Occusept aplikuje pouze za účelem zvlhčení povrchu oka.

Přípravek Occusept lze na základě dostupných údajů používat i u dětí, těhotných a kojících žen.

Upozornění:

- Užíváte-li jiné oční léky, poraďte se o vhodnosti současného užívání s očním lékařem. Pokud se stav do 7 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršuje, vyhledejte očního lékaře.
- Během používání očních kapek v případě zánětů a podráždění očí a při výplachu očí by neměly být nasazeny měkké kontaktní čočky. Je možno je nasadit až 30 minut po použití přípravku.
- Obsah jedné lahvičky by měla používat pouze jedna osoba. Snižuje se tím možnost přenosu případné infekce.
- Při náhodném požití vypijte větší množství vody a kontaktujte lékaře.
- Děti mladší 3 let mohou přípravek používat pouze po konzultaci s odborným lékařem.

Uchovávání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v původním obalu. Po použití těsně uzavřete a skladujte ve vísle poloze.



Varování:

- Pokud si všimnete jakýchkoli nežádoucích účinků, obraťte se na svého lékaře.
- Nepoužívejte přípravek v případě jeho zakalení nebo změně barvy.
- Přípravek nesmí být používán po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu, a to i přestože lahvička nebyla dosud otevřena.
- Po otevření lahvičky může být přípravek používán pouze po dobu 30 dnů.

Balení: Balení přípravku Occusept obsahuje 2 x 20 ml roztoku naplněného v bílé plastové lahvičce s uzávěrem. Příslušenství k přípravku - plastová vanička na výplach oka.

Likvidace: Nespotebovaný prostředek vraťte do lékárny. Čistý obalový materiál likvidujte do příslušného kontejneru na tříděný odpad.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika
Tel.: (+420) 311 230 754, E-mail: phyteneo@phyteneo.cz

údaje jsou uvedené na obale



Objem: 2 x 20 ml C-400-192-16-CZ-R5 ze dne 17. 2. 2021

5°C 25°C	Omezení teploty.	LOT	Číslo šarže.
	Chraňte před slunečním zářením.		Použití do.
	Čtěte návod k použití.		Výrobce.
REF	Referenční číslo.		Výstraha.

SK **Occusept:**

Pred použitím si pozorne preštudujte návod na použitie. Ušchovajte si návod na použitie pre prípad ďalšieho použitia.

Účel určenia: Occusept je zdravotnícka pomôcka pre podpornú liečbu humánnych ochorení očí. Zlepšuje zvlhčenie oka pri syndróme suchého oka rôznej etiológie, vplyvom užívania niektorých liekov, alebo vonkajších podmienok (vysoká teplota, vietor a pod.). Aplikácia viskoelastického roztoku zaisťuje zvlhčenie oka, vedie k odstráneniu cudzorodých látok a upokojuje oči pri akútnom, alebo chronickom zápale spojiviek (conjunctivitis) neinfekčného pôvodu, pri podráždení očí vplyvom vonkajších podmienok (slnko, prach, dym a pod.), alebo vplyvom nosenia kontaktných šošoviek a pri dlhodobom zrakovom vypätí. Roztok je možné použiť pre výplachy očí pri ich zasiahnutí dráždivými látkami a pre odstránenie cudzích telies.

Zloženie: Hypromellosem 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras decahydricus 2 mg v 1 ml. Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetat, caprylic/capric triglyceride, polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.

Charakteristika: Prípravok Occusept je oftalmologikum, očné kvapky. Je to nízkoviskózný izotonický roztok s nedráždivými konzervantmi kyselinou boritou, tetraboritanom sodným a síranom zinočnatým, lipidickými zložkami phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine a extraktom Euphrasia officinalis. Lipidické zložky, frakcie čistěného sojového lecitínu phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, ktoré sa prirodzene vyskytujú v slzách a zlepšujú krytie oka ochranným filmom (predlžujú dobu, po ktorú je film neprerušeny, pretože vytvárajú lipidickú vrstvu, ktorá bráni odparovaniu a narušovaniu súvislej vrstvy slzného filmu), čo významne zlepšuje komfort pacienta pri poruchách tvorby slz. Euphrasia officinalis (svetlík lekárskeý) sa tradične používa pri zápaloch spojiviek sprevádzaných sčervenáním a pálením očí, pri zvýšenom slzení, opuchoch a sčervenáním očných viečok alebo okrajov viečok.

Indikácie: Prípravok sa používa pre zvlhčenie oka, pri syndróme suchého oka, pre vytvorenie ochranného filmu, pri pôsobení nepriaznivých vonkajších podmienok, pri akútnom alebo chronickom zápale spojiviek, pri podráždení očí, pri únave a dlhodobom zrakovom vypätí a pre výplach očí.

Kontraindikácie: Precitlivenosť na ktorúkoľvek látku uvedenú v zložení prípravku.

Interakcie: Prípravok sa nesmie používať súčasne s očnými kvapkami, ktoré obsahujú soli kovov.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe. Pri výskute nezvyčajných reakcií sa poraďte s očným lekárom.

Dávkovanie a spôsob aplikácie: Prípravok sa dávkuje individuálne, zvyčajná dávka je 2 až 3 krát denne 1 až 2 kvapky do spojovkového vaku. Prípravok je možné podľa potreby užívať aj dlhodobo.

NÁVOD NA POUŽITIE KVAPKACIEHO UZÁVERU:

- Otočením uzávěru proti smeru hodinových ručiček odtrhnite ochranný prúžok.
- Odstráňte uzávěr a otočte flaštičku hore dnem.
- Končekmi prstov jednej ruky stiahnite dolné viečko a ľahkým stiskom druhej ruky na flaštičku dávku predpísaný počet kvapiek do oka, alebo spojovkového vaku odhaleného stiahnutím dolného viečka.
- Pri kvapkaní do oka zabraňte kontaktu kvapkadla s okom, alebo pokožkou a nedotýkajte sa špičky kvapkadla, aby nedošlo ku kontaminácii roztoku.
- Po použití nasadte uzávěr vždy späť a dobre uzavrite.
- Výplach oka prevediete priamym prúdom roztoku z flaštičky do oka, alebo pomocou priloženej očné vaničky. Vaničku naplňte po rysku

niekoľkonásobným stlačením flaštičky. Vaničku priložte na postihnuté oko, zakloňte hlavu tak, aby oko bolo ponorené v kvapaline. Pohybujte okom aby sa zvlhčil celý povrch očnej gule. Odporúčaná doba výplachu je 2-5 minút.

- Ak používate kontaktné šošovky, prípravok Occusept aplikujte v prípade zápalov a podráždení očí a pri výplachu očí len ak sú kontaktné šošovky vyňaté. Kontaktné šošovky je možné nasadiť až 30 minút po použití prípravku.
- Pri nasadených kontaktných šošovkách sa prípravok Occusept aplikuje iba za účelom zvlhčenia povrchu oka.

Prípravok Occusept je možné na základe dostupných údajov používať aj u detí, tehotných a dojčiacich žien.

Upozornenie:

- Ak užívate iné očné lieky, poraďte sa o vhodnosti súčasného užívania s očným lekárom. Ak sa stav do 7 dní nezlepší, alebo sa dokonca zhoršuje, vyhľadajte očného lekára.
- Počas používania očných kvapiek v prípade zápalov a podráždení očí a pri výplachu očí by nemali byť nasadené mäkké kontaktné šošovky. Je možné ich nasadiť až 30 minút po použití prípravku.
- Obsah jednej flaštičky by mala používať len jedna osoba. Znižuje sa tým možnosť prenosu prípadnej infekcie.
- Pri náhodnom požití vypite väčšie množstvo vody a kontaktujte lekára.
- Deti mladšie ako 3 roky môžu liek používať len po konzultácii s odborným lekárom.

Uchovávanie: Uchovávejte mimo dosahu detí. Uchovávejte v pôvodnom obale. Po použití tesne uzavrite a skladujte vo vísle polohe.



Varovanie:

- Ak spozorujete vedľajšie účinky, obraťte sa na svojho lekára.
- Nepoužíajte prípravok v prípade jeho zakalenia alebo zmeň farby.
- Liek sa nesmie používať po uplynutí času použitelnosti vyznačenom na obale, a to aj napriek tomu, že flaštička ešte nebola otvorená.
- Po otvorení flaštičky môže byť liek používaný len po dobu 30 dní.

Balenie: Balenie prípravku Occusept obsahuje 2 x 20 ml roztoku naplněného v bielej plastovej flaši s uzáverom. Súčasťou balenia je aj plastová vanička pre výplach oka.

Likvidácia: Nespotebovaný prostriedok vraťte do lekárne. Čistý obalový materiál zlikvidujte do príslušného kontajnera na trieděný odpad.

Neofyt spol. s r.o., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Česká republika
Tel.: (+420) 311 230 754, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

údaje sú uvedené na obale



Objem: 2 x 20 ml Verzia C-400-192-16-CZ-R5 z 17. 2. 2021

5°C 25°C	Teplotný limit.	LOT	Číslo šarže.
	Chraňte pred slnečným žiarením.		Použitelné do.
	Čítajte návod na použitie.		Výrobca.
REF	Referenčné číslo.		Výstraha.



EN **Occusept:**

Read the Instructions for Use carefully before using. Keep the Instructions for Use in case you need to read them again.

Intended Purpose: Occusept is a medical device for the supportive treatment of human eye diseases. It moisturizes eyes and helps to alleviate dry eye syndrome which is often caused by environmental conditions (heat, wind, etc.) or as a side effect of certain medications. Occusept is a viscoelastic solution applied in eyes for foreign object removal and for improved moistening. It also soothes eyes during non-infectious acute or chronic conjunctivitis, calms irritation caused by environmental conditions (sun, dust, smoke, etc.) or by wearing contact lenses, and reduces long-term eye strain. Use the solution to rinse your eyes after a contact with irritants and for foreign object removal.

Composition: Hypromellose 5 mg, boric acid 8.5 mg, sodium tetraborate decahydrate 2 mg in 1 ml. Purified water, Euphrasia officinalis fluid extract, sodium chloride, zinc sulfate heptahydrate, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, α-tocopheryl acetate, caprylic/capric triglyceride, polysorbate 80, ethylenediaminetetraacetic acid disodium dihydrate, sodium hydroxide.

Characteristics: Occusept, ophthalmic eye drops, is a low-viscosity isotonic solution containing non-irritating preservatives; boric acid, sodium tetraborate and zinc sulfate. Further it contains lipidic compounds phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, and extract of Euphrasia officinalis. Purified soy lecithin fractions, phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine, occur naturally in tears forming a protective eye film. This lipid layer prevents moisture evaporation and helps to maintain uninterrupted and continuous tear film. This significantly improves the comfort of patients with tear production disorders. Traditionally, Euphrasia officinalis is used to treat redness and burning eyes caused by conjunctivitis, then, excessive tear production, swelling and red eyelids or eyelid margins.

Indication: The product is used for eye moistening, especially for the dry eye syndrome; further it is used to create a protective tear film during an exposure to unfavourable environmental conditions, for acute or chronic conjunctivitis, eye irritation, fatigue following a long period of eye strain and to rinse the eyes.

Contraindications: Hypersensitivity to any of the compounds stated in the product's composition.

Interactions: The product cannot be used together with eye drops containing metallic salts.

Adverse effects: Unknown. In the case of any unusual reactions to the product, consult your eye specialist.

Dosage and application: Apply the product individually. The usual dose is 2 to 3 times per day. For each dose apply 1 to 2 drops into the conjunctiva. The product can also be used long-term, as needed.

INSTRUCTIONS FOR USING THE DROPPER:

- Turn the cap counterclockwise to tear off the security strip.
- Remove the cap and turn the bottle upside down.
- Using the fingertips of one hand, pull the lower eyelid down and using the other hand, lightly press the prescribed number of drops into the eye or conjunctiva, which is revealed once pulling the lower eyelid down.
- To avoid contamination during application, prevent the eye dropper from direct contact with the eye or the skin and do not touch the tip of the eye dropper.
- After use, always put the cap back on and close tightly.
- To rinse the eye, either apply the direct flow from the dropper to the eye or press the bottle several times until you fill the enclosed eye cup up to

its mark line. Apply the eye cup to the affected eye, then tilt your head so that the eye is submerged in the liquid. Move the eye from side to side to rinse the entire surface of the eyeball. The recommended time for rinsing using the cup is 2-5 minutes.

- Contact lenses must be removed prior to using Occusept only in the case of eye rinsing or when treating eye inflammation and irritation. Contact lenses can be put back in 30 minutes after using the product.
- Wearing contact lenses does not affect the use of Occusept for eye moistening purposes.

According to the information available, Occusept can also be used by children, pregnant and nursing women.

Caution:

- ⚠ If you are using other eye medication, consult your eye specialist regarding the suitability of parallel use. If your condition does not improve within 7 days or even if it worsens, consult your eye specialist.
- ⚠ Soft contact lenses should not be worn during ongoing eye inflammation or irritation, or during the procedure of eye rinsing. Soft contact lenses can be worn 30 minutes after using the product.
- ⚠ To reduce the risk of cross contamination and infection transmission, the content of one bottle should only be used by one person.
- ⚠ If ingested accidentally, drink a larger amount of water and contact your physician.
- ⚠ Children younger than 3 years of age can use the product only following consultation with a specialist.

Storage: Keep out of reach of children. Keep in its original package. Close tightly after opening and store in a vertical position.

Warning:


- ⚠ If you notice any adverse effects, consult your physician.
- ⚠ Do not use the product if its content turned turbid or if it has changed color.
- ⚠ The product cannot be used after the expiration date stated on the package, not even if the bottle is still sealed.
- ⚠ Once the bottle has been opened, the product can only be used for a period of 30 days.

Packaging: Product packaging contains 2 x 20 ml of solution in white capped plastic bottles. Product accessories: a small plastic eye cup for rinsing.

Disposal: Return the expired or unused product back to the pharmacy. The package can be recycled in the appropriate recycle bin.

Neofyt Ltd., Pražská 442, 281 67 Stříbrná Skalice, Czech Republic
Tel.: (+420) 311 230 754, E-mail: phyteneo@phyteneo.cz

Data is stated on the package

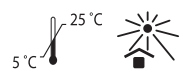

Volume: 2 x 20 ml Version C-400-192-16-CZ-R5 from February 17th, 2021

Temperature limit.	Batch number.
Protect from sunlight.	Use by date.
Read Instructions for Use.	Manufacturer.
Catalogue number.	Warning.

HU **HU Occusept:**

Mielőtt a készítményt használná, figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A későbbi használat érdekében a betegájékoztatót őrizze meg.

Rendeltetés: Az Occusept az emberi szem betegségeinek gyógyítására használatos orvostechnikai eszköz. Segíti a szem nedvesítését bizonyos gyógyszerek fogyasztása vagy külső körülmények (magas hőmérséklet, szél, stb.) miatt kialakuló, különböző eredetű száraz-szem szindróma esetén. A viszkoelasztikus oldat alkalmazása biztosítja a szem nedvesítését, eltávolítja az idegen anyagokat és megnyugtatja a szemet nem fertőzőes eredetű akut vagy krónikus kötőhártyagyulladás (conjunctivitis), illetve külső körülmények (nap, szél, füst stb.) miatti irritáció, kontaktlencse viselés vagy hosszantartó megerőltetés esetén. Az oldat használható a szembe került ingerlő szennyeződések, idegen testek kimosásához is.

Összetétel: Hypromellosum 5 mg, acidum boricum 8,5 mg, natrii tetraboras decahydricus 2 mg 1 ml-ben Aqua purificata, Euphrasia officinalis extractum fluidum, natrii chloridum, zinci sulfurici heptahydricus, phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine, tocoferoli alfa acetat, caprylic/capric triglyceride, polysorbatum 80, dinatrii edetas dihydricus, natrii hydroxidum.

Jellemzés: Az Occusept készítmény oftalmológikum, szemcsepp. Alacsony viszkozitású, nem irritáló tartósítószerrel (bórsavat, nátrium tetraborátot és cink-szulfátot), lipid-összetevőket (phosphatidylcholine-t, phosphatidylethanolamine-t) és Euphrasia officinalis tartalmazó izotóniás oldat. A lipid összetevők, a tisztított szója-lecitin frakciók phosphatidylcholine, phosphatidylethanolamine természetes formában jelen vannak a könnyben, és javítják a szem védőfilmmel való borítását (meghosszabítják a védőfilm sértetlenségének időtartamát, mivel olyan lipid réteget képeznek, amely gátolja az összefüggő könnyréteg elpárolgását, sérülését) és ez jelentősen javítja a könnyképzési zavarban szenvedő beteg komfortérzetét. Az Euphrasia officinalis (orvosi szemvidítófű) hagyományosan használatos a szem kivörösödésével és égésével járó kötőhártya-gyulladás, fokozott könnyezés, a szemhéj vagy a szemhéjszél duzzadása, vörösödése esetén.

Javallat: A készítmény használható a szem nedvesítésére szárazszem-szindróma esetén, védőfilm létrehozására kedvezőtlen külső körülmények, akut vagy krónikus kötőhártya-gyulladás, szemirritáció, túlzott megerőltetés miatti szemfáradtság esetén, valamint a szem öblítésére.

Ellenjavallat: Ne használja ezt a terméket, ha érzékeny annak bármelyik összetevőjére!

Kölcsönhatások: Tilos a készítményt olyan szemcseppekkel együtt használni, amelyek fémsókat tartalmaznak.

Nem kívánt hatás: Nem ismertek. Szokatlan reakciók esetén forduljon szemészorvoshoz.

Adagolás és alkalmazás módja: A készítmény egyéni igény szerint adagolandó, a szokásos adagolási mód: mindkét szem kötőhártyaszakjába cseppentsen egy vagy két csepp naponta 2x-3x. Szükség szerint a készítmény hosszabb időn át is használható.

A CSEPEGTETŐ FLAKON HASZNÁLATI UTASÍTÁSA:

- A zárókupak óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásával a biztosító papírcsíkot szakítsa le.
- A zárókupakot emelje le, majd a flakont fordítsa fejjel lefelé.
- Az egyik kéz ujjbegyeivel az alsószemhéjat húzza le, majd a másik kézben tartott flakontól a szembe vagy a lehűzt szemhéj alatti kötőhártyaszakba csepegtesse be a megfelelő mennyiségű cseppet.
- A szembe csepegtetésekor ügyeljen arra, hogy a csepegtető csúcsa ne érjen a szem felszínéhez vagy a bőrhöz, annak érdekében, hogy a gyógyító oldatba semmiféle szennyeződés ne juthasson be.
- Minden egyes használat után a zárókupakot helyezze vissza és alaposan zárja be.

6. Szemöblítéskor az oldatot közvetlenül a flakontól a szembe öntheti, vagy használhatja a mellékelt szemöblítő kádat. A flakont néhányszor megnyomva töltsen meg a kádat a jelzésig. Helyezze a szemmosó kádat az érintett szemre és hajtsa hátra a fejét úgy, hogy a szem belemerüljön az oldatba. Mozgassa a szemét, hogy az oldat a szemgolyó teljes felületét benedvesítse. Az öblítés javasolt időtartama 2-5 perc.

7. Gyulladt, irritált szem esetén vagy a szem öblítésekor az Occusept szemcsepp alkalmazását megelőzően a kontaktlencsét ki kell venni. A kontaktlencsét a készítmény becépegtetését követő 30 perc után szabad visszahelyezni.

8. Betett kontaktlencsével az Occusept készítmény csak a szem felületének nedvesítésére használható.

Az eddigi adatok alapján az Occusept készítményt gyermekek, terhes nők és szoptatók kismamák is használhatják.

Figyelmeztetés:

- ⚠ Egyéb szemészeti készítmény egyidejű alkalmazásakor a készítmény használatáról konzultáljon a kezelőorvosával. Amennyiben a szem állapota 7 napon belül nem javulna, sőt súlyosabbá válik, forduljon szemészorvoshoz.
- ⚠ Gyulladt, irritált szem esetén, illetve a szem öblítésekor a szemcseppeket a puha kontaktlencsék eltávolítását követően csepegtesse a szembe. A kontaktlencsét az oldat becépegtetését követő 30 perc után szabad visszahelyezni.
- ⚠ Egy flakon tartalmát csak egy személy által javallatos használni. Így csökkenthető az esetleges fertőzés terjedése.
- ⚠ Véletlen szerű lenyelés esetén igyon bő mennyiségű vizet, majd forduljon orvoshoz.
- ⚠ A 3 évnél fiatalabb gyermekek a készítményt csak a szakorvos javaslata alapján használhatják.

Tárolás: Gyermekektől távol, elzárva tartandó. Az eredeti csomagolásában tárolandó. Használatát követően szorosan zárja le és a flakont álló helyzetben tárolja.

Figyelmeztetés:

- ⚠ Bármiféle kellemetlen hatás érzékelésekor forduljon a kezelőorvosához.
- ⚠ Ne használja a készítményt, ha az oldat bármiféle zavarosságát, színváltozást észleli.
- ⚠ Tilos a készítményt a csomagolásán feltüntetett lejárati idejét követően használni még akkor is, ha a flakon előzőleg nem lett felnyitva.
- ⚠ Az oldat csak a flakon felnyitását követő 30 napon belül használható.

Kiszerezés: Az Occusept készítmény kiszerezése 2 x 20 ml oldatot tartalmazó zárókupakos fehér műanyag flakon. A csomagolás részét képezi a szemöblítéshez használható kis műanyag kád is.

Áramtalanítás: A fel nem használt készítményt szolgáltatassa vissza a gyógyszerháza. A tiszta csomagoló anyagot a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja ki.

Neofyt spol. s r.o. (Kft.), 281 67 Stříbrná Skalice, Pražská 442, Cseh Köztársaság
Tel.: (+420) 311 230 754, e-mail: phyteneo@phyteneo.cz

Lásd a csomagoláson feltüntetett adatokat

Úrtartalom: 2 x 20 ml C-400-192-16-CZ-R5, kelt 2021. 17. 02.

Hőmérsékleti határ.	A tétel száma.
Védje napfénytől.	Felhasználható.
Olvassa el a használati útmutatót.	Gyártó.
Referenciászám.	Vigyázat, figyelmeztetés.